

آشنایی با پورت

پورت وسیله ای است که دارای یک مخزن و یک لوله ارتباطی می باشد. مخزن از نظر اندازه مشابه صفحه ساعت مچی است و در زیر پوست در قسمت بالای قفسه سینه در سمت راست یا چپ قرار داده می شود. مخزن پورت کت توسط لوله باریکی با ضخامت مشابه مغزی خودکار به یکی از سیاهرگ های اصلی بدن در محل اتصال آن به قلب ارتباط پیدا می کند. پورت از ابزارهای دستیابی به ورید های مرکزی است.



از پورت می توان در کلیه تزریقات وریدی و نمونه گیری خون استفاده کرد.



مزایای پورت

تمام کسانی که برنامه درمانی طولانی مدت وریدی دارند ، می توانند با پورت گذاری ، برای همیشه از رگ گیری های مکرر (که حداقل هر ۳ روز یکبار انجام می شود) رهایی یابند.


کودکان و نوزادان مبتلا به سرطان ، اغلب رگهایی ظریف و آسیب پذیر دارند ، پورت ضمن تامین امنیت لازم برای انجام تزریقات و خونگیری ، در کاهش استرس های کودک نقش بسزایی دارد.

معایب پورت

انسداد مسیر کاتتر ، تشکیل لخته تا خوردگی و پیچ خوردگی مخزن و مشکلات عفونی و یا رسوب داروها. احتمال مجموع این مشکلات ۹.۸٪ است.

نحوه جاگذاری پورت

پورت گذاری توسط جراح انجام می شود. قبل از پورت گذاری ، وضعیت سلامتی بیمار با دقت ارزیابی می شود و طی زمانی کمتر از ۳۰ دقیقه در اتاق عمل ، جاگذاری انجام می شود. در صورت عدم بروز مشکل خاص مدت بستری یک شب است ولی به طور معمول عصر روز عمل نیز بیمار قابل ترخیص است. بخیه هایی که بر روی پوست زده می شود ، معمولاً یک هفته تا ۱۰ روز بعد قابل کشیدن هستند.

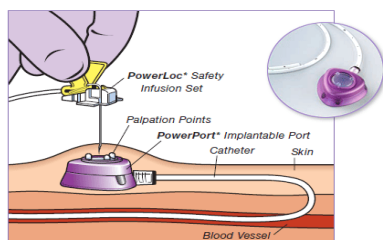

خطراتی که هنگام کارگذاری وجود دارد چیست؟

این عمل عموماً عارضه حادی ندارد ولی با توجه به اینکه در محل کارگذاری این وسیله عناصر حیاتی عبور می کنند به ندرت ممکن است عوارض شدیدی نیز ایجاد شود. از جمله: آسیب دیدن پرده ای که اطراف ریه را پوشانده یا آسیب دیدن سرخرگ گردنی

چند نکته مهم

- سوزن و پانسمان به صورت هفتگی تعویض شود.
- در صورت خیس یا خونی شدن ، پانسمان روی پورت ، سریعاً تعویض شود.
- بعد از هر بار تغییر داروی تزریقی ، مسیر پورت با ۲۰ میلی لیتر آب مقطر شستشو شود.
- در صورت عدم استفاده ، هر ۶ هفته با ۲۵۰۰ واحد هپارین رقیق شده ، مسیر پورت شستشو شود.
- رسوب های ناشی از تداخل دارویی ، اغلب موجب آسیب های جبران ناپذیر مسیر پورت می شوند.

- تا حدود ۱۰۰۰ مرتبه تزریق در مخزن قابل استفاده هستند.

- پس از اتمام دوره درمان باید این وسیله را خارج کرد.

- بلافاصله بعد از قرار دادن پورت می توان از آن استفاده کرد. البته در صورت امکان بهتر است حدود ۳ الی ۵ روز از این زمان بگذرد تا درد و التهاب محل عمل کاهش یابد.

- در صورت عدم وجود عارضه در زخم پس از گذشت ۴۸ الی ۷۲ ساعت از زمان کارگذاری تماس آب با زخم بلامانع است. گاهی از پانسمانهای ضد آب استفاده می شود .

- محل پورت از هر گونه ضربه ایمن باشد.

- پس از حدود یک هفته انجام فعالیت های سبک ورزشی ایراد ندارد. فعالیت های عادی فرد مانند حرکت دادن دستها و سر و گردن و راه رفتن و...از روز اول مانعی ندارد.

پورت :

روشی مطمئن

برای تزریقات وریدی



بیمارستان حضرت فاطمه معصومه (س)

بخش انکولوژی

غلامی